



01 AVRIL 2020

COVID19

ALIMENTATION DE LA BASE NATIONALE

DOCUMENTATION UTILISATEUR

nehs DIGITAL

CONTACTS PROJET

Courriel : info.digital@groupe-nehs.com

Laetitia VIRELAUDE

Directrice de projet Télé-Interprétation

Mob. +33 (0)6 65 21 41 90

Courriel : laetitia.virelaude@groupe-nehs.com

Raphaël RUIZ

Directeur BU Télé-Interprétation

Mob. +33 (0)6 15 73 14 64

Courriel : raphael.ruiz@groupe-nehs.com



nehs DIGITAL

CONNEXION A LA BASE NATIONALE





Contactez NEHS DIGITAL pour récupérer vos identifiants
Envoyez un email à info.digital@groupe-nehs.com

nehs DIGITAL

CREATION DU TELEDossier

1

Cliquer sur le bouton « Créer un télédossier »
Choisir « Téléradiologie – CT – COVID19 »

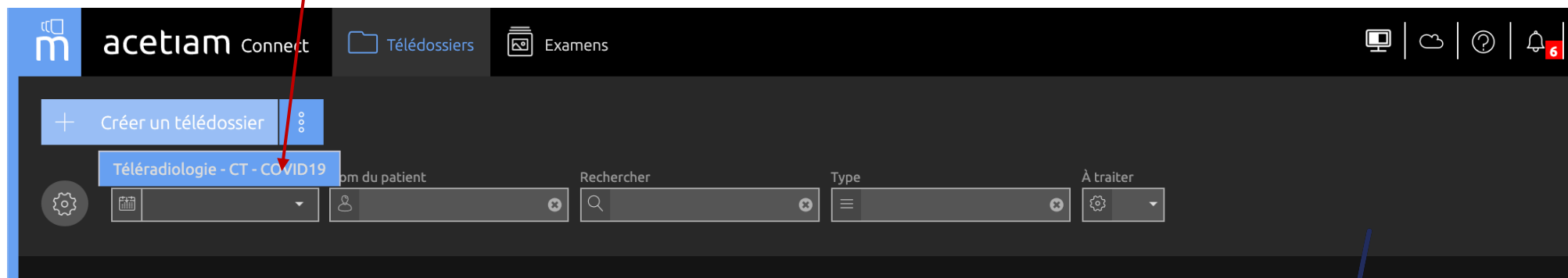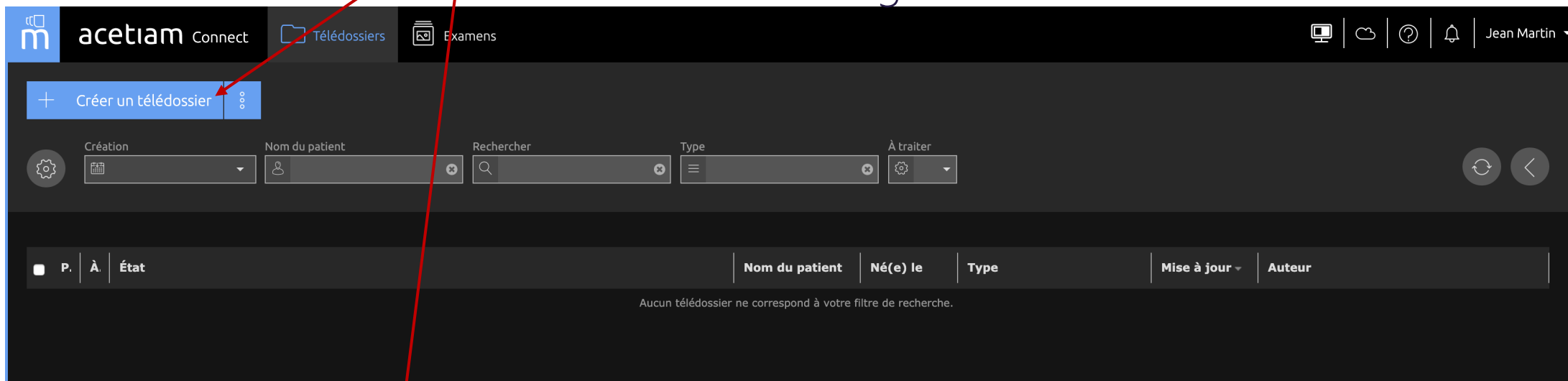

AJOUT DE L'EXAMEN

2

Ajout possible :

- A partir du PACS
- A partir du Nexus (examen déjà présent)
- A partir d'un répertoire (upload)

Cas de l'upload :

3

The screenshot shows a web interface titled 'Ajouter des examens'. At the top, there are three tabs: 'À partir du PACS', 'À partir du serveur local', and 'À partir d'un répertoire'. Below the tabs is a blue button labeled 'Parcourir...'. A large grey dashed box contains the text 'Déposer les fichiers ici'. Below this is a table with columns: Patient, Né(e) le, Sexe, Identifiant, Date d'examen, Modalité, Description de l'examen, Nb fichi..., and Taille. At the bottom, there is a dropdown menu 'Sélectionner la communauté...' and two buttons: 'Ajouter' and 'Annuler'.

Possibilité de glisser-déposer directement (Selon navigateur)

3

Cliquer sur « Parcourir » puis ajouter les images de l'examen

AJOUT DE L'EXAMEN

4

Vérifier l'ajout de l'examen
Vérifier la communauté

Ajouter des examens

À partir du PACS À partir du serveur local À partir d'un répertoire

Parcourir... 1 fichier parcouru 1 fichier DICOM parcouru 0 fichier non DICOM parcouru

Déposer les fichiers ici.

Patient	Né(e) le	Sexe	Identifiant	Date d'examen	Modalité	Description de l'examen	Nb fichi...	Taille
<input checked="" type="checkbox"/> Brun^Loane	1 oct 1973	F	90956590	29 oct 2019 09:50:17	CT	CT Thorax	1	0.12 Mo

ETABLISSEMENT1

Ajouter Annuler

5

Cliquer sur
« Ajouter »

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



acetiam Connect | Télédossiers | Examens | 558412 | admin Administrat

nehS DIGITAL | SFR | cerf

Téléradiologie - CT - COVID19
Créé le 27 mars 2020 - 13:23
En cours de création

Patient

Nom : TEST
Prénom : Unknown
Né(e) le : 06/03/1965
Sexe : M
Identifiant : 2143

Motif
Veuillez indiquer le motif de ce dossier.
Motif * Ajout à la base COVID-19 Demande d'expertise et ajout à la base COVID-19

Compte-rendu
Veuillez joindre le compte-rendu de l'examen ainsi que tout élément d'information permettant de contextualiser ce dossier.

Indication * Suspicion COVID patient paucisymptomatique Suspicion COVID patient sous O2 Suivi Autre

Délai entre début des symptômes et TDM * < 3 jours entre 3 et 7 jours entre 7 et 20 jours > 21 jours

Résultat TDM * Négatif Compatible Certain Autre

Résultat PCR * PCR + PCR - ne sait pas

Indications - commentaires

Documents joints
Ajouter...

Examen(s)
Veuillez joindre l'examen, les séries natives et reconstructions sont utilisées pour l'expertise; seules les séries natives de l'examen CT sont ajoutées à la Base de cas COVID-19.

Examens DICOM | CT\SR - 6 mars 2020 - 11:57 | TEST Unknown | 1147 Im 271.88 Mo
Ajouter...

Brouillon enregistré automatiquement

Envoyer | Supprimer

6

Ajout automatique des informations

7

Renseigner les informations

8

Ajouter le CRR et documents

9

Cliquer sur « Envoyer »

Saisie de la PCR Obligatoire



10

Création automatique d'un dossier anonymisé

Envoi automatique vers la base nationale
COVID19-SFR-CS